



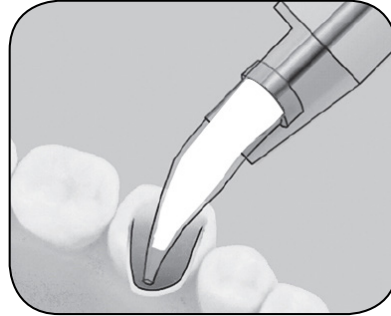

Glossary: www.dmg-america.com/literature

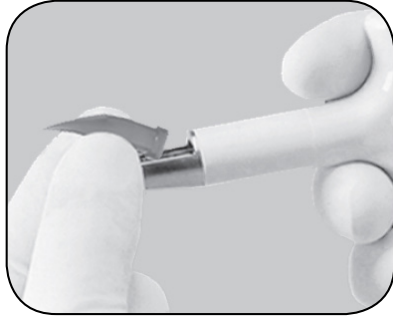

English

DMG Composite Dispenser

Product description and indication

Dispenser for precision placement of dental materials.

- 1) Place tube into the syringe barrel
- 2) Squeeze syringe with a slow, steady pressure
- 3) Remove and dispose tube after use

Storage and shelf life

Sterilize syringe handle in autoclave or dry heat, not exceeding 285°F (140°C).

Contra-indications

Do not use chemiclave on plastic parts.

Español

Dispensador de compuesto DMG

Descripción del producto e indicaciones

Dispensador para la colocación precisa de materiales dentales.

- 1) Coloque el tubo dentro del cilindro de la jeringa
- 2) Presione la jeringa con una presión lenta y constante
- 3) Después de usarlo, quite y deseche el tubo

Almacenamiento y conservación

Esterilizar el asidero de la jeringa en autoclave o en calor seco, sin exceder los 285°F (140°C).

Contraindicaciones

No use quimi-clave en partes plásticas.

Français

Distributeur composite DMG

Description du produit et indication

Distributeur pour le placement précis des matériaux dentaires.

- 1) Placez le tube dans le corps de la seringue
- 2) Appuyez lentement sur la seringue en maintenant une pression constante
- 3) Retirez et jetez le tube après utilisation

Stockage et durabilité

Stérilisez la poignée de la seringue à l'autoclave ou par chaleur sèche ne dépassant pas 140°C (285°F).

Contre-indications

N'utilisez pas de chemiclave sur les pièces en plastique.



242 South Dean St., Englewood, NJ 07631
Distributed by: DMG America LLC
800-662-6383 • Emer: 800-535-5053
www.dmg-america.com
Made in the USA

©DMG America LLC

Date Revised: 12/2018 000471 REV A